


Pipette pour chimistes

Faites une pipette avec un tube en verre sur laquelle vous porterez les mesures dont vous avez besoin : cuiller à café, cuiller à soupe, centimètre cube, etc. Vous faites la partie conique sur la flamme d'un Bunsen.

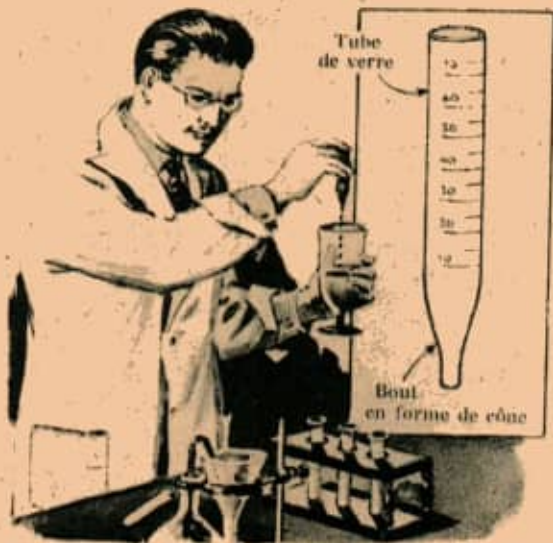

Puis vous coupez la pointe obtenue de façon à conserver un petit trou à l'extrémité inférieure. Pour marquer la pipette, bouchez-en l'ouverture inférieure et remplissez-la avec de l'eau correspondant aux différents volumes. Marquer à la lime les niveaux de ces différents volumes. Quand vous utilisez la pipette, vous la remplissez au niveau voulu et vous fermez la partie supérieure du tube avec votre doigt. Le liquide s'écoule quand vous soulevez le doigt.